

ホリスターであれば、状況にあわせた装具が選べます。


実は各国同じ!

日常生活の中で抱えるニーズ

No.1 排泄物が漏れない



No.2 皮膚の健康が保てる

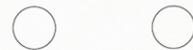

No.3 使いやすい



No.4 臭いが漏れない



No.5 装着時の快適さ



ホリスターの
個別ケア

選べる
面板



選べる
ストーマ袋



豊富な
アクセサリ

ホリスター社 各国顧客調査 2015より
(日本/アメリカ/イギリス/ドイツ、消化管用ストーマ保有者:術後平均3.98年)

皮膚保護剤



SF
1~4日

新生児にも使える
低刺激性

FW
3~5日

適度な耐水性と
粘着強度

FT
4~7日

高い耐水性と
粘着強度

FF
3~5日

自由に
成形可能

どんな面板がぴったり?

様々な症例や環境にあわせてぴったりの1枚を。

全面
皮膚保護剤



テープ付
皮膚保護剤



平面



やわらかい凸



硬い凸面



粘着面



面板形状




装着期間を延長したい



SF
1~4日
FW
3~5日
FT
4~7日

吸水スピードを活かした
頻回なケアが必要

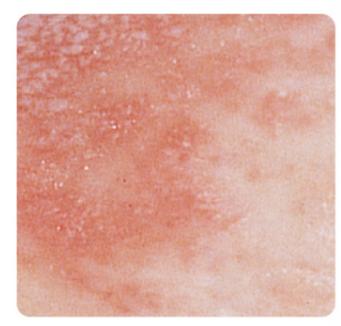


FW
3~5日
FT
4~7日
SF
1~4日

膨隆した腹壁に貼付したい




プレカットで
しっかりきわを押さえない

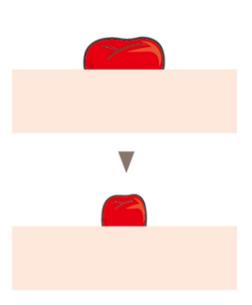


小刻みなサイズ展開
単品系: 5mm刻み
二品系: 3mm刻み
※一部異なる製品があります。

ホリスターの
ひと工夫 きわを押さえる凸面構造
ストーマのきわに局所的に圧が
かかるので、漏れを防ぎます。

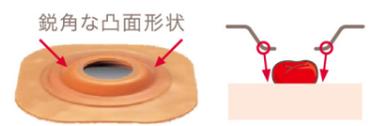


漏れへの不安を減らしたい

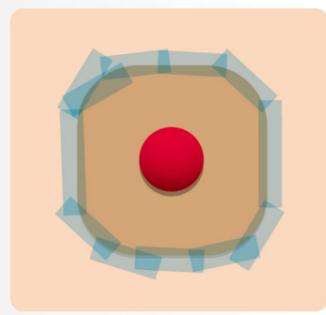

テープ付
皮膚保護剤

創の近くに貼付したい

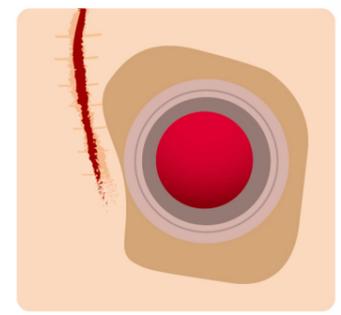

テープ付
皮膚保護剤

形状



単品系
モデルマフレックス
シリーズ



二品系
ニューイメー
ジ
シリーズ

どんなストーマ袋がぴったり？



様々な症例や環境にあわせてぴったりの1枚を。

ウルトラ
クリア

透明

肌色

通常サイズ

小さめサイズ

開放型

閉鎖型

キャップ式

ロックンロール
マイクロシール

排出口



カラー・サイズ



ストーマを直接見ながら
貼付がしたい



二品系



洗浄やパウダーの散布など
頻回なケアがしたい



二品系



便性の変化に
あわせたい

水様便



やや軟らかい便



キャップ式



開放型



ホリスターの **ひと工夫**

同じ排出口だから負担なく
面板やストーマ袋の種類を
変えられます。



温泉やゴルフなどの
イベントにあわせたい



通常サイズ




透明

小さめサイズ



肌色

薄い洋服を着たい

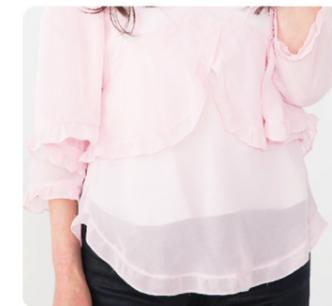

透明

肌色

選べるストーマ袋

選べるストーマ袋

新しい排出口に統一

ロックンロール マイクロシール



漏れへの安全性、使いやすさを向上させた排出口



セキュリティーフラップ

上からかぶせて確実に閉鎖します。

小さい突起のかみ合わせ

排出口をしっかり閉じます。



重みと水に強いシールで
しっかりロック

リッププレート

排出口が開けやすくなり、
排出、拭き取りが
より簡単で衛生的にできます。



開けやすく
拭きやすい構造

ストーマ袋の素材

防臭しなやかフィルム

防臭性、防音性に優れた独自の4層構造フィルム
(ウルトラクリア製品は、内側のみ4層で、外側は3層)



肌様不織布

やわらかく肌触りが良く、目立ちにくい肌色の不織布
撥水性も良く、シャワー後に水分を拭き取ることでさらっと快適に使えます



入浴時でも、
フィルターシール不要

AF300 オストミー フィルター




利便性及び 機能性を追求したフィルター

高い撥水性

水に強い特殊フィルターにより
入浴や水泳でも、
フィルターにシールを貼る
必要がありません。



袋の外側からも

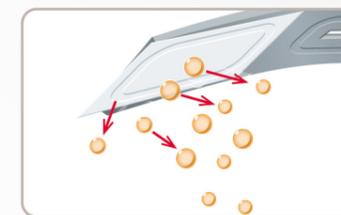

袋の内側からも


高い消臭機能

活性炭を使用し、優れた消臭効果を発揮します。
空気以外は通しません。



高い通気性(ガス抜け)

面積の広い通気口で
高い通気性を実現します。

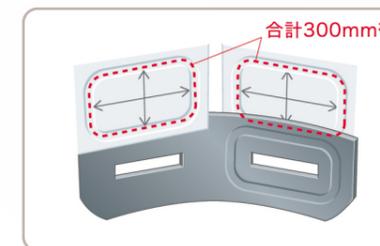

腹壁、ストーマにあわせた調整



アダプト皮膚保護シール



アダプト皮膚保護凸面リング／凸面リング オーバル



皮膚保護シート



アダプトストーマパウダー



どんなアクセサリが必要？



ストーマケアをサポートする充実したラインアップ



アダプトオストミーベルト

装具の密着をサポート



アダプト保護膜パック



アダプトはくり剤スプレー／パック

肌にやさしいケア



m9 消臭スプレー

アダプト消臭潤滑剤 236mlボトル／8mlパック

臭い対策や手間の軽減



しわ、くぼみを調整したい
装着期間を延長したい



アダプト皮膚保護シール



より高い凸面が必要



アダプト皮膚保護凸面リング




軽いびらんに対応したい



アダプトストーマパウダー




トイレの時間を短縮したい

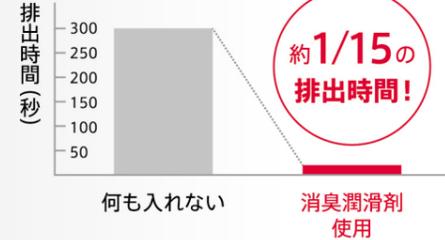

アダプト消臭潤滑剤

臭いを気にしたくない

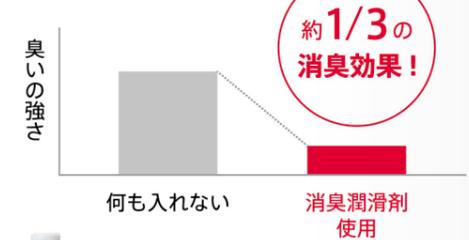

ホリスター社調べ

皮膚トラブルを予防したい




アダプト保護膜パック



アダプトはくり剤スプレー／パック

面板をしっかり押さえない

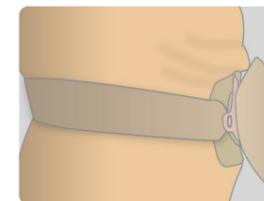

アダプトオストミーベルト